

NovoPen® 6)

Notkunarleiðbeiningar

Lestu þessar notkunarleiðbeiningar vel áður en þú notar NovoPen® 6 til inndælingar á insúlini í fyrsta skipti.
Stuttar leiðbeiningar eru á bakhlið leiðbeininganna



Efnisyfirlit

Yfirlit yfir hluta pennans	Innsíða kápunnar	
Kynning	Innsíða kápunnar	
Mikilvægar athugasemdir	1	
Undirbúningur pennans fyrir inndælingu		
Insúlínþörlykja sett í	2	
Ef notað er hvít eða skýjað insúlín.....	5	
Ný nál sett á pennann	6	
ALLTAF skal prófa insúlínflæðið fyrir inndælingu	8	
Skammtur valinn	10	
Inndæling skammts	12	
Eftir inndælingu	14	
Hvernig nota skal skammtaminnið		
Hvað er skammtaminni?	16	
Hvernig síðasti skammtur er athugaður ..	18	
Hvernig persónuleg skrá yfir inndælingar er haldin	20	
Hvernig athugað er hve mikið insúlín er eftir	22	
Ef þú þarf meira insúlín en eftir er í rörlykjunni	24	
Hvernig skipt eru um notaða insúlínþörlykju	26	
Sérstök skilaboð í glugganum	28	
Hvernig hugsa skal um pennann	30	
Ummirða	30	
Þrif	30	
Geymsla.....	31	
Förgun.....	31	
Ábyrgð	32	
Tæknilegar upplýsingar	32	

NovoPen® 6)

Penni



Pennahetta



Insúlín-kvarði

Hylki fyrir
rörlykju



Skammtaminni



Fjöldi eininga í síðustu inndælingu

Tími frá síðustu inndælingu (kk:mm:ss)

Einnota nál (dæmi)



Ytri nálar-hetta



Innri nálar-hetta



Nál



Pappírs-flipi

Insúlínrölykja (Penfill® rölykja 3 ml)



Festing
fyrir nál
(til að setja á nál)

Litakóðuð
merking

Glerkúla
(aðeins í hvítu og
skýjuðu insúlini)

Stimpill

Kynning

Takk fyrir að velja NovoPen® 6.

NovoPen® 6 er margnota insúlínþenni með skammtaminni.

NovoPen® 6 pakkningin inniheldur einn pennu, mjúkt veski til að geyma í og þessar notkunarleiðbeiningar.

Lestu notkunarleiðbeiningarnar vandlega áður en þú notar pennann – líka þó að þú hafir áður notað NovoPen® 6 eða önnur svípuð hjálpartæki frá Novo Nordisk til inndælingar. Þær lýsa öllu sem þú þarf að vita um pennann og hvernig hann er notaður. NovoPen® 6 er margnota inndælingarpenni til notkunar af einum sjúklungi til inndælingar á insúlini sem sjúklingar með sykursýki gefa sér sjálfir heima. NovoPen® 6 inndælingarpennann skal eingöngu nota ásamt viðeigandi vörum svo hann virki á nákvæman og öruggan hátt. Inndælingarpenninn er notaður ásamt Penfill® 3 ml rörlýkjum með insúlini frá Novo Nordisk og einnota nálmum (nálar fylgja ekki með). Notandi inndælingarpennans getur stilt á þann skammt sem þarf frá 1 til 60 eininga, í 1 einingar þrepum.

Penninn er með skammtaminni sem hjálpar þér að muna fjölda eininga í síðustu inndælingu og tímum sem liðinn er frá síðustu inndælingu. Skammtaminnið geymir einnig upplýsingar um þínar inndælingar síðustu þrjá mánuðina. Sjá bls. 20-21 í notkunarleiðbeiningunum til að frekari upplýsingar um hvernig á að nota upplýsingarnar til að halda persónulega skrá um inndælingar. Til að halda persónulega skrá er hægt er að flytja upplýsingarnar til dæmis yfir í snjallsíma.

Penninn er margnota sem býðir að þú getur notað hann aftur. Þegar þú hefur notað allt insúlinið í rörlýkunni, skiptir þú einfaldlega um rörlýku og setur nýja í. Ef þú notar meira en eina gerð af insúlini er sterklega ráðlagt að þú notir mismunandi NovoPen® 6 fyrir hverja gerð af insúlini.

Penninn fæst bæði grár og blár.

Mundu alltaf eftir því fyrir hverja inndælingu að athuga nafn og lit rörlýkunnar til að ganga úr skugga um að hún innihaldi rétta gerð af insúlini.

Ef ruglast er á insúlinum getur það haft alvarlegar læknisfræðilegar afleiðingar. Því er mælt með því að ef þú notar tvennis konar insúlin að ræða við heilbrigðisstarfsmann hvernig eigi að forðast rugling.

Um notkunarleiðbeiningarnar:

Í leiðbeiningunum eru gefin fyri mæli, skref fyrir skref, um hvernig nota á pennann. Mikilvægar upplýsingar og frekari upplýsingar eru greinilega merktar með merkjum sem sýnd eru hér fyrir neðan:



Mikilvægar upplýsingar

Veittu þessum athugasemendum sérstaka athygli þar sem þær eru mikilvægar fyrir örugga notkun pennans. Ef þú fylgir ekki fyri mælunum nákvæmlega getur þú fengið of lítið eða of mikilinslín, eða ekkert insúlin.



Frekari upplýsingar


- **EKKI NOTA NovoPen® 6 ÁN ÞESS AÐ HAFNA FENGIÐ NÆGILEGA ÞJÁLFUN** hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingi. Vertu viss um að vera örugg(ur) um hvernig inndæling er gefin áður en þú byrjar meðferð með pennanum.
- **Ef þú ert blind/blindur eða sjónskert/ sjónskertur máttu ekki nota NovoPen® 6 ÁN HJÁLPAR.** Fáðu hjálp frá einstaklingi með góða sjón sem hefur fengið þjálfun í notkun NovoPen® 6.
- **Prófaðu ALLTAF insúlinflæðið fyrir hverja inndælingu.** EKKI NOTA pennann ef ekki kemur buna af insúlini frá nálaroddinum þegar flæðið er prófað. Ef þú prófar ekki insúlinflæðið gætir þú hugsanlega fengið of lítið insúlin, eða ekkert insúlin.
- **Ef þú missir pennann** skaltu athuga hvort insúlinrörykjjan hafi skemmt, t.d. sprungið. Ef nauðsynlegt er skal skipta um rörykjuna og setja nýja í.
- **Ef þú fyrir slysni skrúfar pennann í sundur** á milli inndælinga er mikilvægt að þú prófir insúlinflæðið fyrir næstu inndælingu. Nauðsynlegt getur verið að gera það nokkrum sinnum áður en insúlinbuna kemur frá nálaroddinum. Ef ekkert insúlin kemur gætir þú e.t.v. ekki fengið neitt insúlin.
- **NovoPen® 6 er hannaður til notkunar ásamt Penfill® 3 ml rörykjum og NovoFine® Plus, NovoFine® eða NovoTwist® einnota nálmum,** allt að 8 mm að lengd.

Novo Nordisk ber ekki ábyrgð á skaða vegna notkunar NovoPen® 6 með öðrum vörum en þeim sem hér er getið um.

- **Athugaðu alltaf nafnið og litinn á rörykjunni** til að vera viss um að hún innihaldi þá gerð af insúlini sem þú átt að fá. Ef þú notar ranga gerð af insúlini mun blóðsykurinn hugsanlega verða of hár eða of lágur.
- **Hafðu aukapenna alltaf meðferðis** og auka insúlin af þeirri gerð eða þeim gerðum sem þú notar og aukanálar, ef þú týnir pennanum eða ef hann skemmist.
- **Aldrei deila pennanum**, insúlinrörykjum eða nálmum með öðrum. Þetta er aðeins ætlað þér til að nota.
- **Geymu alltaf pennann**, insúlinrörykjurnar og nálar þar sem aðrir hvorki ná til né sjá, sérstaklega börn.
- **Geymu pennann alltaf hjá þér.** EKKI SKILJA HANN EFTIR Í BÍLNUM EÐA Á ÖÐRUM STÖÐUM ÞAR SEM GETUR ORÐIÐ OF HEITT EÐA OF KALT.
- Umönnunaraðilar **verða að sýna sérstaka varúð þegar þeir fjarlægja og farga notuðum nálmum** til að forðast stunguslys og krossmengun.

2 Insúlínörlykja sett í

- Dragðu pennahettuna af.

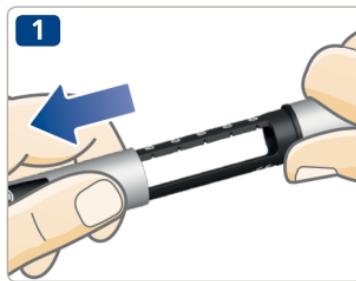


- Snúðu hylkið fyrir rörlykjuna af. Leggðu það til hliðar til nota síðar.



- **Stimpilsstöngin gæti staðið út** úr pennanum. Ef svo er skal þrýsta henni alveg inn þar til hún stöðvast.

i Stimpilsstöngin og endinn á stimpilsstönginni geta verið laus og hreyfst til. Það er eðlilegt og hefur ekki áhrif á virkni pennans.

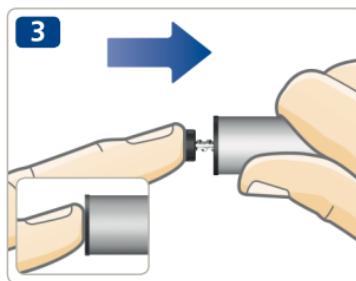

- Taktu nýja insúlínrölykju. Haltu á hylkinu fyrir rörylkjuna og láttu rörylkjuna renna niður með **endann fyrir nálina fyrst** eins og sýnt er á myndinni. Liturinn á rörylkjunni getur verið annar en sá sem sýndur er á myndinni. Liturinn fer eftir því hvaða gerð af insúlíni þú notar.



Athugaðu nafnið og litinn á rörylkunni til að vera viss um að hún innihaldi þá tegund af insúlíni sem þú þarf. Ef þú notar ranga gerð af insúlíni getur blóðsykurinn hugsanlega orðið of hár eða lágor.

Athugaðu hvort rörykjan hafi skemmt, t.d. sprungið. Sjáðu hvernig það er gert í **fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörykju, sem er í Penfill® 3 ml rörykju pakkningunni.**

Athugaðu hvort insúlínin líti út eins og það á að gera. Í fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörykju getur þú séð hvernig þín tegund af insúlíni á að líta út.

NovoPen® 6 er hannaður til notkunar með Penfill® 3 ml rörykju og NovoFine® Plus eða NovoTwist® einnota nálum, allt að 8 mm að lengd.

5

- Skrúfaðu hylkið fyrir rörlykjuna aftur á pennann eins og sýnt er á myndinni, þar til þú **heyrir eða finnur smell**.



Ef notað er hvítt eða skýjað insúlín


Ef þú notar insúlínörlyku með insúlini sem er skýjað (hvít insúlindreifa) **skal alltaf endurblanda það rétt fyrir inndælingu.**

Sjá fylgiseðil með Penfill® 3 ml rörlykju til að fá upplýsingar um hvernig á að endurblanda þína tegund af insúlini.

Gakktu úr skugga um að það sé nægilegt rými í rörlykjunni áður en þú endurblandar insúlinið:


Stimpillinn á að vera **yfir hvíta strikinu** á hylkinu fyrir rörlykjuna, þegar haldið er á pennanum eins og sýnt er á myndinni. Það er nauðsynlegt til að tryggja að glerkúlan í rörlykjunni hafi nægilegt rými til að endurblanda insúlinið.

Ef stimpillinn fer niður fyrir hvíta strikið skal skipta um insúlínörlykju og setja nýja í, sjá blaðsiður 26-27.

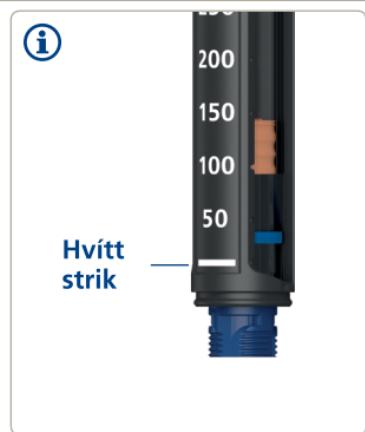


6 Ný nál sett á pennann

1

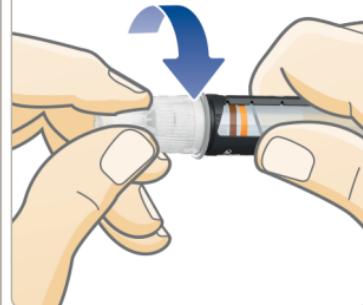

- Taktu nýja nál og fjarlæggðu pappírsflipann.
- Þrýstu nálinni **beint** á pennann. **Snúðu þar til hún situr þétt.**

2

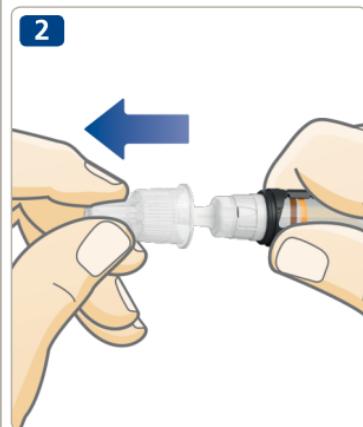

- Dragðu af ytri nálarhettuna og geymdu hana. Hana skal nota síðar eftir inndælingu, þegar fjarlægja skal notaða nál á öruggan hátt.




Notaðu alltaf nýja nál við hverja inndælingu. Það dregur úr hættunni á stífluðum nánum, mengun, sýkingum og ónákvæmri skömmtnum.

Notaðu aldrei bogna eða skemmda nál.

Ekki setja nýja nál á pennann fyrr en þú ert tilbúin(n) að gefa næstu inndælingu.

- Fjarlægðu innri nálarhettuna og fargaðu henni.
Hugsanlegt er að dropi af insúlini sjáist á nálaroddinum. Það er eðlilegt **en engu að síður skal prófa insúlinflæðið.**

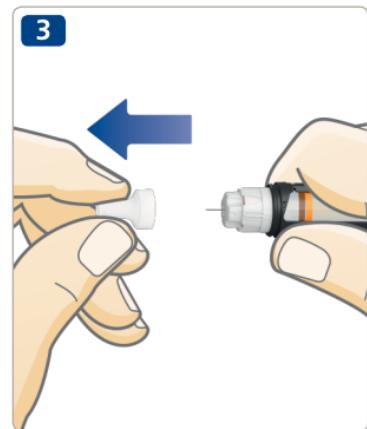

⚠ Tvær hettur eru á nálinni. Þú verður að fjarlægja báðar hetturnar. Ef þú gleymir að fjarlægja báðar hetturnar mun ekkert insúlin dælast inn og blóðsykurinn getur orðið of hárr.

(i) NovoPen® 6 er hannaður til notkunar með Penfill® 3 ml rörlykju og NovoFine® Plus, NovoFine® eða NovoTwist® einnota nálum, allt að 8 mm að lengd.

ALLTAF skal prófa insúlinflæðið fyrir inndælingu



Prófaðu ALLTAF insúlinflæðið fyrir inndælingu.

Haltu áfram að prófa þar til buna af insúlini kemur frá nálaroddinum. Þetta tryggir að holrúm eða loftbólur hafa verið fjarlægðar og að insúlin nær í gegnum nálina.

- Dragðu út þrýstihnappinn, ef hann er ekki þegar úti.

- Snúðu þrýstihnappinum og veldu **2 einingar**.





- **Yttu þrýstihanninum niður** þar til skammtateljarinn sýnir „0“. „0“ á að vera til móts við skammtavísinn.
- Athugaðu hvort buna af **insúlini komi** frá nálaroddinum.

Ef ekkert insúlin kemur skaltu endurtaka skref 1-3 þar til buna af insúlini kemur frá nálaroddinum.

Ef ekkert insúlin kemur í ljós eftir nokkrar tilraunir skaltu athuga í insúlin glugganum hvort bil sé á milli svarta stimpilsendans og stimpilsins, sjá mynd 3A og 3B. Ef þú sérð ekkert bil skaltu skipta um nál og athuga insúlinflæðið aftur.

Prófun á insúlinflæðinu er lokið þegar þú sérð bunu af insúlini koma frá nálaroddinum.

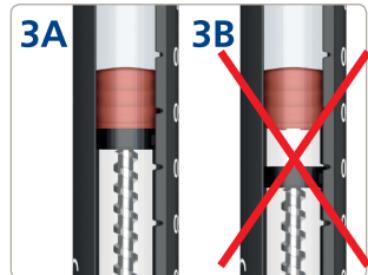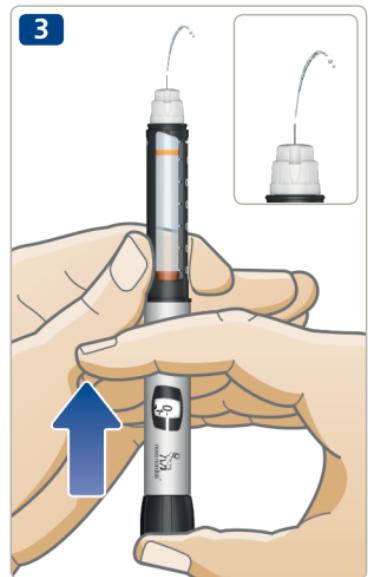

EKKI REYNA INNDÆLINGU EF EKKERT INSÚLIN KEMUR Í LJÓS.

Hugsanlega mun ekkert insúlin verða gefið, þó að skammtateljarinn færist. Það getur valdið of háum blóðsykri.

Ef ekkert insúlin kemur í ljós eftir endurteknað prófanir á flæðinu skaltu ekki nota pennann. Hafðu samband við söluaðila til að fá nýjan penna.



- Dragðu þrýstihnappinn út, ef hann er ekki þegar úti.
- Vertu viss um að skammtateljarinn sýni "0" áður en byrjað er. „0“ á að vera til móts við skammtavísinn.



- Snúðu þrýstihnappinum til að velja þann skammt sem þarf. Snúa má þrýstihnappinum fram og aftur.

(i) Þrýstihnappurinn breytir fjölda eininga. Aðeins skammtateljarinn og skammtavísirinn sýna valinn fjölda eininga í hverjum skammti. Hægt er að velja allt að 60 einingar í skammti.



Líttu alltaf í gegnum insúlíngluggann til að **ganga úr skugga um að insúlinið í pennanum líti út eins og það á að gera.** Í fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörlykju má sjá hvernig insúlinið sem þér er ætlað á að líta út.

Notið alltaf skammtateljarann og skammtavísinn til að sjá hve margar einingar hafa verið valdar.

EKKI nota insúlínkvarðann á hylkinu fyrir rörlykjuna. Hann sýnir einungis um það bil hve mikið insúlin er eftir í pennanum.

EKKI telja smellina í pennanum.

Ef stillt er á rangan fjölda eininga og þeim dælt inn mun blóðsykurinn hugsanlega verða of hár eða of lágor.



AUÐVELT Á AÐ VERA AÐ SNÚA ÞRÝSTIHNAPPNUM. EKKI SKAL ÞVINGA HANN TIL AÐ SNÚAST.

Þegar færri en 60 einingar eru eftir í pennanum stöðvast skammtateljarinn við þann fjölda eininga sem eru eftir í pennanum. *Sjá blaðsíður 24—25 ef þú þarf meira insúlin en eftir er í rörlykjunni.*



Prófaðu ALLTAF insúlinflæðið fyrir inndælingu.

- **Athugaðu nafnið og litinn** á rörlykjunni til að tryggja að hún innihaldi þá gerð af insúlini sem þú þarf. Ef notuð er röng gerð af insúlini getur blóðsykurinn hugsanlega orðið of hár eða of lágor.
- **Stingdu nálinni í húðina** eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur sýnt þér.
- **Vertu viss um að sjá skammtateljarann.**
- **Ýttu þrýstihnappinum inn** þar til skammtateljarinn sýnir „0“. „0“ verður að standa til móts við skammtavísinn. Þú heyrir e.t.v. smell eða finnur fyrir honum.
- Eftir að skammtateljarinn sýnir „0“ **skaltu láta nálina vera í húðinni og telja rólega upp að 6.**
Ef nálín er fjarlægð of snemma gætir þú séð bunu af insúlini koma frá nálaroddinum. Ef það gerist hefur fullur skammtur ekki verið gefinn og þú skalt athuga blóðsykurinn oftar.


2

Bíddu og
teldu hægt

1-2-3-4-5-6



- Fjarlægðu nálina úr húðinni.

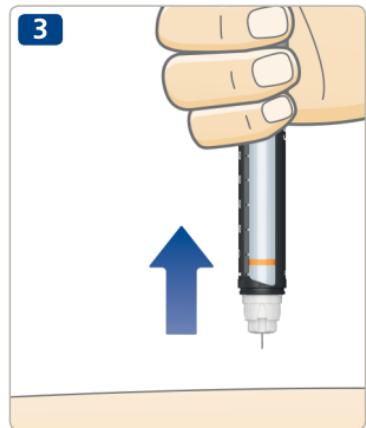

**⚠ Geföu alltaf skammt með því að ýta þrýstihnappnum inn.
Ekki snúa honum.** Ef þrýstihnappnum er snúið er engu insúlini dælt inn.

Notaðu alltaf skammtateljarann til að vita hve mörgum einingum þú hefur dælt inn. Ekki telja smellina í pennanum. Skammtateljarinn sýnir nákvæman fjölda eininga.

Ef þrýstihnappurinn stöðvast áður en skammtateljarinn sýnir „0“ er nálin hugsanlega stífluð. Snúðu skammtateljaranum aftur á „0“ og skiptu yfir í nýja nál. Prófaðu insúlinflæðið og dældu inn fullum skammti.

- (i)** Hugsanlega kemur dropi af insúlini í ljós á nálaroddinum eftir inndælingu. Það er eðlilegt og hefur ekki áhrif á skammtinn.



- Fjarlægðu nálina strax með því að skrúfa hana af í ílát fyrir oddhvassa hluti.



- Ef þú ert ekki með ílát fyrir oddhvassa hluti skaltu nota aðra höndina til að setja nálarhettuna aftur á nálina. **Settu nálaroddinn inn í ytri nálarhettuna** og láttu pennann liggja á sléttu yfirborði, án þess að snerta nálina.



- Ekki hreyfa við ytri nálarhettunni fyrr en hún hylur nálina.
- Þegar hún hylur nálina er **ytri nálarhettunni þrýst varlega alveg á.**




Aldrei reyna að setja innri nálarhettuna á nálina aftur. Þú gætir stungið þig á nálinni.

- Haltu um svarta hylkið fyrir rörlykjuna og skrúfaðu nálina af. Fargaðu henni varlega eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn hafa sagt þér.



- Settu pennahettuna aftur á pennann** eftir hverja notkun til að verja insúlinið gegn ljósi.
- Geymdu pennann vel. Penninn á að vera þar sem aðrir **hvorki ná til né sjá, sérstaklega börn.** Sjá upplýsingar á blaðsíðu 31 um hvernig á að geyma pennann.

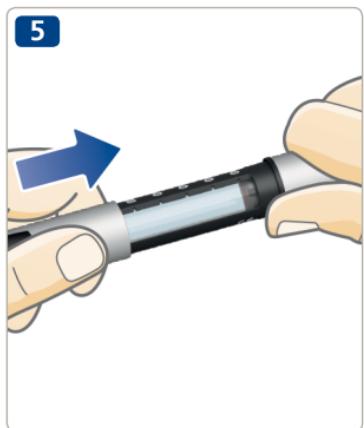

⚠ Haltu alltaf um svarta hylkið fyrir rörlykjuna þegar þú skrúfar nálina af. Annars gætir þú skrúfað pennann í sundur. Ef það gerist skaltu skrúfa pennann saman aftur. Skiptu um nál og prófaðu insúlinflæðið aftur fyrir næstu inndælingu til að tryggja að þú fáir fullan skammt.

Fjarlægðu alltaf og fargaðu notuðum nálum frá pennanum á öruggan hátt, til dæmis í ílát fyrir oddhvassa hluti, eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn hafa sagt. Það minnkar hættuna á stífluðum nálum, mengun, sýkingu og ónákvæmri skömmutun. Ekki geyma pennann með nálinni á.

1



Penninn er með skammtaminni sem geymir upplýsingar um **hve mikil** insúlin þú fékkst við síðstu inndælingu og **tímann sem liðinn er** frá inndælingunni:

- Talan efst sýnir **fjölda eininga** sem þú dældir síðast inn.
- Klukkan fyrir neðan sýnir **klukkustundir, mínútur og sekúndur (kk:mm:ss)** sem liðnar eru frá síðstu inndælingu.

Dæmið hér til vinstri sýnir að 5 einingum var dælt inn fyrir 3 klukkustundum, 45 mínutum og 10 sekúndum síðan.

Hvernig virkar það?

Skammtaminnið skráir skammtinn þegar skammtatjarinn fer aftur á „0“ og þrystihnappnum hefur verið þryst alveg inn eftir inndælingu.

Athugið að skammtaminnið **geymir** eingöngu **upplýsingar um síðustu inndælingu eða prófun á insúlinflæði**. Það þýðir að þegar þú athugar insúlinflæði fyrir nýja inndælingu mun það skrifa yfir upplýsingar frá síðustu inndælingunni.


Hvað man skammtaminnið?

Skammtaminnið geymir einnig **upplýsingar um þínar inndælingar síðustu þrjá mánuðina.** Þú getur aðeins séð þessar upplýsingar ef þú færir þær til dæmis yfir í snjallsíma, spjaldtölvu, tölvu eða blóðsykursmæli. Sjá blaðsiður 20-21 um hvernig á að nota upplýsingarnar til að halda persónulega skrá um inndælingar.



Skammtaminnið segir **ekki** hve mikið insúlín þú þarf við næstu inndælingu. Ef þú ert í vafa um hve mikið insúlín þú þarf skaltu athuga blóðsykurmagn hjá þér. Annars áttu það á hættu að fá of mikið eða of lítið insúlín.

Hvernig síðasti skammtur er athugaður

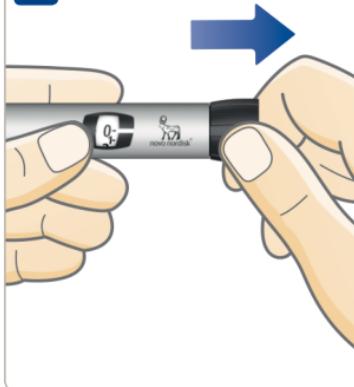1

- Vertu viss um að skammtateljarinn sýni „0“ áður en þú byrjar. „0“ verður að standa til móts við skammtavísinn.
- Dragðu þrýstihnappinn út.**

2

- Ýttu þrýstihnappnum aftur inn.**

Núna sýnir glugginn upplýsingar um síðasta skammt. Það slokknar á glugganum eftir 15 sekúndur.



Ef þig grunar að skammtaminnið sýni rangar upplýsingar, til dæmis ef þú hefur meðhöndlað pennann á annan hátt en þú ætlaðir, skaltu alltaf mæla blóðsykurinn áður en þú velur skammt fyrir næstu inndælingu.

Ekki snúa þrýstihappnum þegar þú athugar síðasta skammt. Ef þú snýrð honum og ýtir á hann glatast upplýsingarnar um síðasta skammt.

Ef þú óvart snýrð þrýstihappnum skaltu snúa honum aftur á „0“, áður en þú ýtir honum inn. Þá glatast **ekki** upplýsingarnar um síðasta skammt.

Skammtaminnið í pennanum má tengja nándarmælingum (NFC, near field communication). **Ef þú ert með snjallsíma, spjaldtölvu, tölvu, blóðsykursmæli eða annað tæki sem styður einnig NFC** getur þú fært bínar upplýsingar um inndælingar úr pennanum yfir í tækið til að halda bína eigin skrá yfir inndælingar. Þú þarfst einungis að ganga úr skugga um að tækið hafi app (smáforrit) sem hentar eða annan hugbúnað sem getur lesið og sýnt upplýsingar um inndælingarnar.

1 Athugaðu hvort tækið geti tekið við nándarmælingum (NFC).

Athugaðu notkunarleiðbeiningar fyrir tækið til að kanna hvort tækið taki við NFC og nákvæmlega hvar NFC er staðsett í tækinu.

2 Athugaðu hvort tækið sé með „app“ (smáforrit) eða annan hugbúnað til að lesa upplýsingar um inndælingar bínar.

Ef tækið er ekki með smáforrit eða annan hugbúnað sem hentar getur þú fundið það og hlaðið niður eða haft samband við fulltrúa Novo Nordisk til að fá upplýsingar.

3 Athugaðu smáforritið eða annan hugbúnað til að kanna:

- hvernig skal undirbúa tækið til að taka við upplýsingunum.
- hvernig sýna á upplýsingar um inndælingar.





4 Upplýsingar um inndælingar fluttar yfir í tækið.

- **Haltu** skammtaminni pennans beint að NFC svæðinu á tækinu.
- **Bíddu** á meðan upplýsingar síðustu inndælinga hafa sjálfkrafa verið fluttar yfir í tækið.



Penninn er með sérstakt auðkenni sem er staðsett á þrystihannum eins og sýnt er. Þegar inndælingaskrá þín sést á tækinu er auðkenni pennans tengt upplýsingum þínum um inndælingar.

Ef þú notar mismunandi penna fyrir mismunandi gerðir af insúlini skaltu athuga auðkenni pennans. Það sýnir frá hvaða penna upplýsingarnar um inndælingar koma.

Hvernig athugað er hve mikið insúlín er eftir



Skammtateljarinn sýnir nákvæmlega hve mikið insúlín er eftir í rörlykjunni, þegar færri en 60 einingar eru eftir.

- Snúðu þrýstihnappnum þar til hann stöðvast.
- Athugaðu skammtateljarann:
 - Ef hann sýnir „60“: **60 einingar eða fleiri** eru eftir í rörlykjunni.
 - Ef hann sýnir lægri tölu en „60“: **Þá sést sá fjöldi eininga sem eftir er** í rörlykjunni.
- Snúðu þrýstihnappinum til baka þar til skammtateljarinn sýnir „0“.

- Notáðu **insúlínkvarðann** til að sjá hve mikið insúlín er **um það bil** eftir í insúlínörlykjunni.



- (i)** Ef þú þarf meira insúlín en eftir er í rörlykjunni skaltu taka fullan skammt úr nýrri rörlykju, sjá blaðsiðu 24.

Ef þú þarf meira insúlin en eftir er í rörlykjunni



Ef þú þarf meira insúlin en eftir er í rörlykjunni **skaltu taka fullan skammt úr nýri rörlykju.**

- Fjarlægðu nálina. Snúðu hylkinu fyrir rörlykjuna af og fargaðu notuðu rörlykjunni.
- Settu nýja rörlykju í, sjá blaðsíður 2-4.



- Tengdu nýja nál og **þrófaðu insúlinflæðið**, sjá blaðsíður 6-9.



- Veldu og dældu inn **fullum skammti með nýju rörlykjunni**, sjá blaðsíður 10-13.

 **Aðeins ef þú hefur fengið þjálfun eða ráðleggingar frá lækninum eða hjúkrunarfræðingi máttu skipta skammtinum á milli tveggja rörlykja.**

Ef þú verður annars hugar, reiknar skakkt út eða gleymir að prófa insúlinflæðið getur þú í það skiptið fengið of líttinn eða of stóran skammt sem gæti leitt til þess að blóðsykurinn verði of mikill eða of líttl.

Ef þér líður illa eftir að hafa skipt skammti skaltu mæla blóðsykurinn og/eða hafa samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing.

Ef þú skiptir skammtinum:

- 1 Prófaðu insúlinflæðið.**
- 2** Athugaðu nákvæmlega hve mikilins er eftir og skrifaðu það hjá þér. Snúðu brýstihnappnum þar til hann stöðvast. Skammtateljarinn sýnir þá fjölda eininga sem eftir eru í rörlykjunni.
- 3** Dældu inn öllu insúlininu sem er eftir í rörlykjunni.
- 4** Reiknaðu út hve margar einingar þú þarf i viðbót til að fá fullan skammt.
- 5** Fjarlægðu notuðu málina og rörlykjuna.
- 6** Settu nýja rörlykju í og undirbúðu hana til inndælingar.
- 7** Settu nýja nál á pennann og **þrófaðu insúlinflæðið.**
- 8** Veldu afganginn af skammtinum og dældu honum inn með nýju rörlykjunni.

(i) Ef þú skiptir skammtinum og gefur tvær inndælingar mun skammtaminnið aðeins geyma upplýsingar um seinni inndælinguna.

Hvernig skipt er um notaða insúlínrörlykju

1



- Fjarlægðu nálina af pennanum og fargaðu henni, ef hún er enn á pennanum, sjá blaðsiður 14-15.

2



- Snúðu hylkinu fyrir rörlykjuna af.

(i)

Þegar þú snýrð af hylkinu fyrir rörlykjuna mun stimpilsstöngin standa út úr pennanum. Hún getur færst til af sjálfu sér. Þrýstu henni aftur inn eins og sýnt er á blaðsiðu 2.

- Hallaðu hylkinu fyrir rörlykjuna og **láttu rörlykjuna renna út.** Fargaðu henni eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur sagt fyrir um.
- Þrýstu stimpilsstönginni aftur inn. **Settu síðan nýja rörlykju í og snúðu hylkinu fyrir rörlykjuna aftur á pennann.** Settu nýja nál á og prófaðu insúlinflæðið, sjá blaðsiður 6-9.



28 Sérstök skilaboð í glugganum



Skammtaminnið er óvirkt eða rafhlaðan tóm

Rafhlaðan er tóm eða skammtaminnið hefur ekki verið virkjað.

Hvað skal gera?

Dragðu þrýstihappinn út og þrýstu honum síðan inn aftur til að sýna upplýsingar um síðustu inndælingu. Ef skammtaglugginn sýnir ekkert eftir það er rafhlaðan tóm.

Hafðu samband við söluaðilann til að fá nýjan penna. Þú getur áfram notað pennann til inndælingar á insúlini þar til þú færð nýjan penna. *Sjá upplýsingar um ábyrgð á blaðsiðu 32.*

Skammtaminnið virkjast þegar þú notar NovoPen® 6 í fyrsta skiptið



Síðasta inndæling ekki skráð

Skammtaminnið hefur ekki skráð síðustu inndælingu.

Hvað skal gera?

Venjulega byrjar skammtaminnið að virka aftur næstu inndælingu.

Ef ekki hafðu þá samband við söluaðila til að fá nýjan penna. Þú getur áfram notað pennann til inndælingar á insúlini án þess að nota skammtaminnið.

Ef þú ert í vafa um hve miklu insúlini þú hefur hefur dælt inn skaltu mæla blóðsykurinn.



Penninn nálgast fyrningu

Rafhlaðan fer að verða tóm og skammtaminnið nálgast fyrningu.

Hvað skal gera?

Endingartími pennans er fjögur til fimm ár. Þegar rafhlaðan fer að verða tóm og skilaboðin "End" hafa runnið yfir gluggann í einhvern tíma, mun slokkna á glugganum og hann hætta að virka.

Hafðu samband við söluaðilann til að fá nýjan penna. Þú getur áfram notað pennann til inndælingar á insúlini þar til þú færð nýjan. *Sjá upplýsingar um ábyrgð á blaðsíðu 32.*

Umhirða

- Notaðu NovoPen® 6 aðeins eins og lýst er í þessum leiðbeiningum.
- **Þú mátt ekki missa pennann** eða reka hann í hart yfirborð. Ef þú missir hann eða grunar að hann sé bilaður skaltu athuga hvort insúlnrörlykjan hafi skemmt, t.d. sprungið. Skiptu um rörlykju og settu nýja í ef þú telur það nauðsynlegt.
- **Haltu pennanum frá** beinu sólarljósi, ryki, óhreinindum, vökvu og háum hita.
- **Ekki reyna að gera við pennann** eða taka hann í sundur.
- Penninn er með innbyggða litíum rafhlöðu. Af öryggisástæðum er ekki hægt að skipta um hana. Þegar rafhlaðan er tóm skaltu hafa samband við söluaðilann til að fá nýjan penna. Þú getur áfram notað pennann til inndælingar á insúlini án þess að nota skammtaminnið.

① Liftími rafhlöðunnar er fjögur til fimm ár ef fyrsta notkun hans er fyrir dagsetninguna sem prentuð er við hliðina á þessu merki á ytri umbúðunum.

Þrif

- **Aðeins má þrífa pennann** með rökum klúti sem aðeins er vættur með **mildu hreinsiefni**.
- **Þú mátt ekki þvo pennann, leggja hann í vatn eða smyrja hann.** Ekki nota efni sem innihalda bleikiefni, svo sem klór, joð eða etanól til að þrífa pennann. Það getur skemmt hann.
- Ef insúlin lendir á pennanum **skaltu þrífa það áður en það börnar** með rökum klúti sem er aðeins vættur með mildu hreinsiefni.



Verður að geyma á þurrum stað.

Geymsla

- Sjá upplýsingar um geymsluskilyrði í fylgiseðli sem fylgir með Penfill® 3 ml rörlykju pakkningunni ef penninn er geymdur með Penfill® 3 ml rörlykju.
- Geymu pennann við stofuhita ef hann er ekki með insúlínörlykju.
- **Ekki geyma pennann með nálinni á.**
- **Penninn má ekki frjósa** eða vera geymdur í kæli við hliðina á kælieiningu.
- **Geymu insúlínörlykjuna eins og getið er um í fylgiseðlinum með Penfill® 3 ml rörlykjum.** Þar getur þú einnig séð upplýsingar um fyrningardagsetningu. Fyrningardagsetningin sem prentuð er á rörlykjuna gildir fyrir ónotaðar rörlykjur í kæliskáp. Notaðu aldrei rörlykju eftir að fyrningardagsetningin á rörlykjunni eða á pakkanum er liðin.
- **Geymu pennann,** eftir því sem við verður komið, **í veskinu sem fylgir með.**

Förgun

- **Ekki má farga pennanum** með heimilissorpi.
- **Fylgdu ráðleggingum læknisins, hjúkrunarfræðings, lyfjafræðings eða yfirvalda um förgun pennans.** Hafðu umhverfið í huga þegar þú fargar pennanum. Hann inniheldur litium-rafhlöðu, rafhluta og endurunnið efni. Fjarlægðu einnig nálina og insúlínörlykjuna áður en þú fargar pennanum.
- Umbúðirnar má endurvinna.



Farga skal raftækjum aðskildum frá öðrum úrgangi.

Ábyrgð

Ábyrgðartími NovoPen® 6 er 3 ár, sem nær einnig til skammtaminnisins.

Ef þú kemst að því að NovoPen® 6 er bilaður mun Novo Nordisk láta þig hafa nýjan. Skilaðu honum til söluaðilans til rannsóknar innan þriggja ára frá því að þú fékkst hann. Sendu kvittunina með frá því að þú fékkst NovoPen® 6 pennann.

Ef grunur leikur á að alvarlegt atvik (aukaverkun) hafi átt sér stað meðan á notkun NovoPen® 6 stendur, skal tilkynna það til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is.

Framleiðandinn tekur ekki á sig ábyrgð á bilunum á NovoPen® 6 pennanum, ef þessum leiðbeiningum hefur ekki verið fylgt.

Ef þér finnst að upplýsingarnar sem fylgja með þessum notkunarleiðbeiningum vera rangar skaltu hafa samband við söluaðilann til að greiða úr vandamálinu.

Ef þú þarf að nota lotunúmer pennans er það að finna á þróstihappnum eins og lýst er á myndinni á innri síðu kápunnar.

NovoPen®, Penfill®, NovoFine® og NovoTwist® eru skrásett vörumerki í eigu Novo Nordisk A/S, Danmörku.

N Mark er vörumerki eða skrásett vörumerki NFC Forum, Inc. í Bandaríkjunum og í öðrum löndum.

Tæknilegar upplýsingar

CE merkið á lækningatæki þýðir að varan er í samræmi við tilskipun frá Evrópusambandinu um lækningatæki 93/42/EEC.

Novo Nordisk A/S lýsir því hér með yfir að gerð NovoPen® 6 fyrir útvarpsbylgjur er í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins 2014/53/EU.

Heildartexta EU tilskipunar má finna á eftirfarandi vefsíðó: <http://bit.ly/NovoPen6>

NovoPen® 6 uppfyllir sértæk fráviksmörk um skammtanákvæmni samkvæmt staðlinum ISO 11608-1, Pen-Injectors for Medical Use, Part 1: Requirements and test methods.

Geymsla og notkunarskilyrði

- Án insúlínþörflykju:
Hitastig: 5 °C til 40 °C
Rakastig: 15% RH til 93% RH
Loftþrýstingur: 700 hPa til 1.060 hPa.
- Með insúlínþörflykju:
Sjá leiðbeiningar í fylgiseðli með Penfill® 3 ml rörlýkju sem fylgir með pakkningu Penfill® 3 ml rörlýkju.

Notkunarháttur

Til samfelltara notkunar.

Vörn gegn innstreymi

NovoPen® 6 er merktur með IP50, þar sem:

- 5 þýðir vörn gegn skaðlegu magni af ryki.
- 0 þýðir að tækið er ekki varið gegn innstreymi vökva.



Vörn gegn raflosti

Gerð: Internally Powered ME Equipment.

Stig: Type BF Applied Part.

Rafsegulssamhæfni

Þó að penninn sé hannaður með vörn gegn skaðlegum truflunum við heimilisaðstæður þá gefur NovoPen® 6 frá sér, notar og getur geislað orku á tíðni útværpsbylgja (RF). Því getur orðið truflun við vissar aðstæður.

Inndælingunum er ekki stjórnað með rafeindatækni og skammtanákvæmni verður því ekki fyrir truflunum frá rafsegulsviði.

CE
0123

Útgáfudagsetning: 2019/05

© 2020
novonordisk.com

Framleiðandi:
Novo Nordisk (China)
Pharmaceuticals Co. Ltd.
99 Nanhai Road, TEDA
300457 Tianjin, Kína

Fyrir
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
 DK-2880 Bagsværd, Danmörk

8-4260-41-040-1

